

ARMAÇÕES

1. O que é uma armação de óculos?

A armação é a estrutura que sustenta as lentes corretivas ou solares. Ela deve unir estética, conforto, resistência e adaptação ao rosto.

Uma boa escolha depende de:

- Formato do rosto
- Grau das lentes
- Peso da lente
- Uso diário ou ocasional
- Estilo do cliente

TIPOS DE ARMAÇÕES

🕶️ **Aro Fechado** (Full Rim)

Características:

A lente fica totalmente envolvida pela armação.

É o modelo mais resistente e tradicional.

Indicações:

- ✓ Graus alto
- ✓ Crianças
- ✓ Uso diário
- ✓ Lentes mais espessas

Materiais comuns:

Acetato

Metal

TR90



Meio Aro (Nylon / Half Rim)

Características:

A parte superior possui armação.
A parte inferior é presa por fio de nylon.


Indicações:

- ✓ Pessoas que querem um modelo mais leve
- ✓ Visual discreto
- ✓ Lentes com boa resistência (como policarbonato)

Materiais:

Metal

Nylon

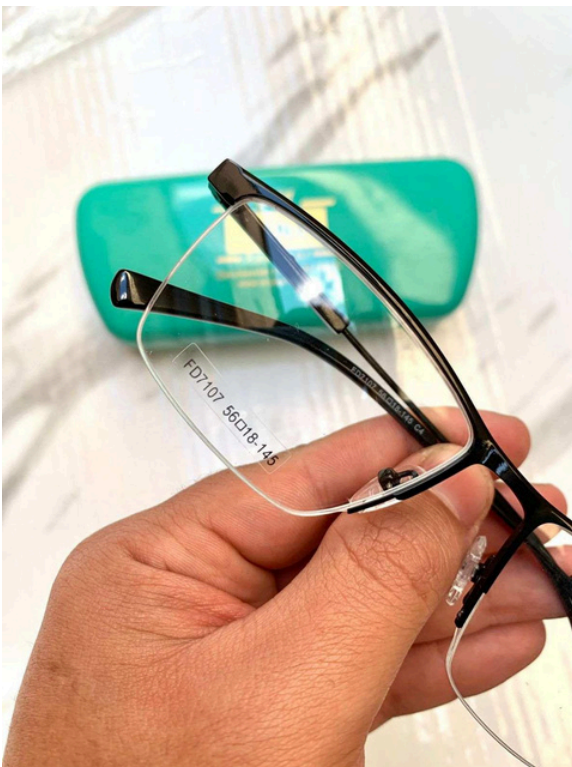

Sem Aro (3 Peças / Parafusada)

Características:

Não possui aro ao redor da lente.

A lente é presa diretamente nas hastes e ponte.

Indicações:

- ✓ Visual sofisticado
- ✓ Pessoas que gostam de armação quase invisível

Atenção: **Evitar para lentes muito pesadas ou graus muito altos.**



Acetato

Características:

Material nobre mais grosso e resistente, muitas opções de cores e estampas

Vantagens:

- ✓ Confortável
- ✓ Durável
- ✓ Visual moderno

Indicado para:

Modelos grandes

Pessoas que gostam de destaque



Metal

Características:

Armações finas e leves

Visual mais clássico

Materiais:

Monel

Aço inox

Alumínio



Indicado para: Quem prefere
modelos discretos

Titânio

Características:

Material premium

Muito leve

Alta resistência

Indicado para:

Pessoas sensíveis ao peso

Uso prolongado



TR90

Características:

Material flexível, Resistente a impactos Leve

Indicado para:

Crianças

Esportistas

Pessoas que precisam de conforto



ESTRUTURA DA ARMAÇÃO

1. Aro

Parte que segura a lente.

2. Ponte

Parte que fica apoiada no nariz e une os dois aros

.

3. Plaquetas

Apoios de silicone ou plástico no nariz.

4. Hastes

Laterais que passam pelas orelhas.

5. Charneira (Dobradiça)

Une a haste ao frontal.


6. Terminal

Parte final da haste que apoia atrás da orelha

.

7. Parafusos

Fixam componentes da armação.

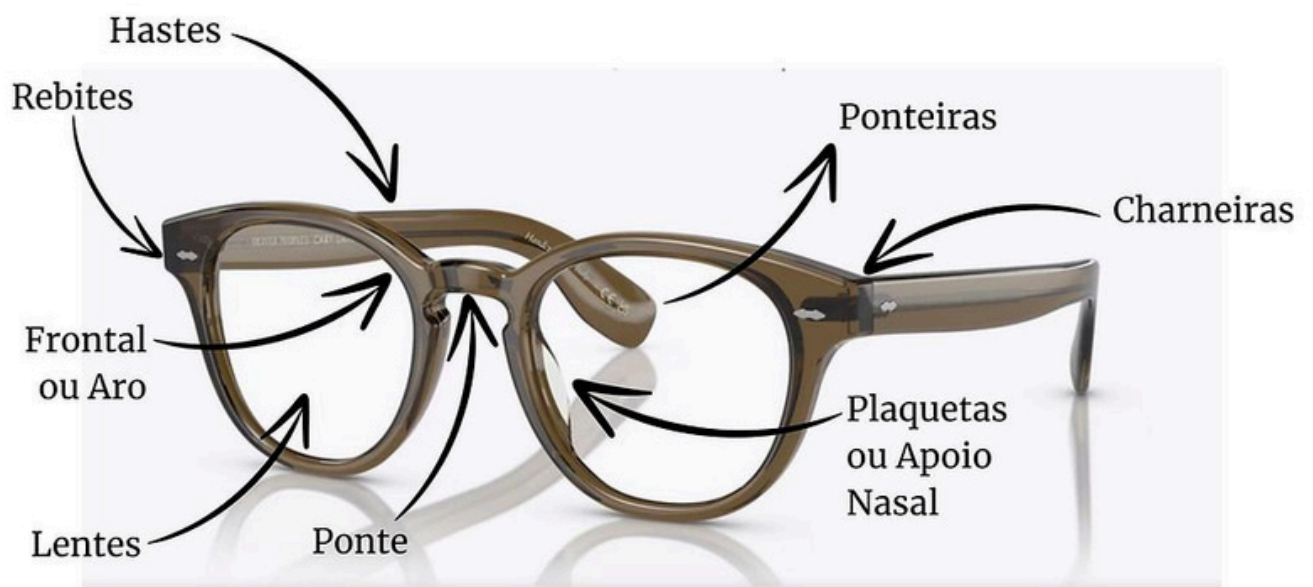

MEDIDAS DA ARMAÇÃO

Normalmente aparecem na haste:

Exemplo:

52 □ 18 - 140

Significa:

52 mm → Calibre da lente
Largura horizontal da lente

18 mm → Ponte
Distância entre as lentes

140 mm → Comprimento da haste
Tamanho da lateral

INDICAÇÃO DE ARMAÇÃO PELO GRAU

Miopia alta:

Preferir aro fechado

Lentes menores reduzem espessura

Hipermetropia:

Pode usar vários modelos

Astigmatismo:

Preferir armações firmes para manter o eixo
correto

Progressivas:

Evitar armações muito pequenas

Melhor altura de lente maior

- ✓ A armação deve ficar confortável no nariz
- ✓ Não pode apertar as têmporas
- ✓ A pupila deve ficar bem posicionada na lente
- ✓ O tamanho deve respeitar o rosto do cliente
- ✓ O modelo deve unir estética + necessidade visual